



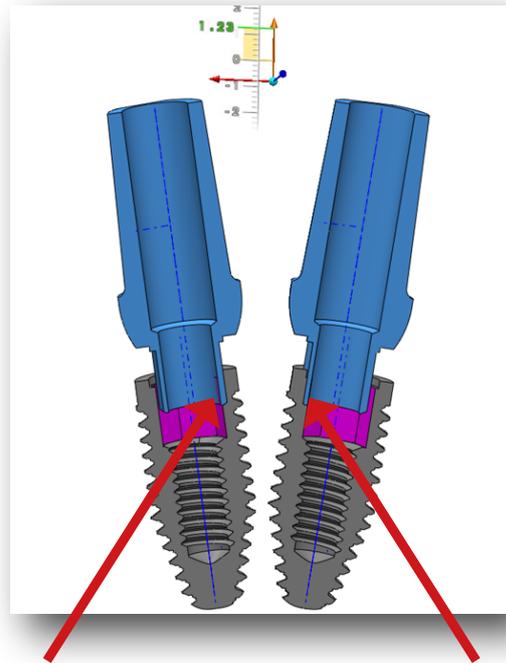


## ISTRUZIONI PER L'USO DISPOSITIVI SOL® IMPRONTAFACILE

VOGLIO RENDERE SEMPLICE  
UN'IMPRONTA SU IMPIANTI ?

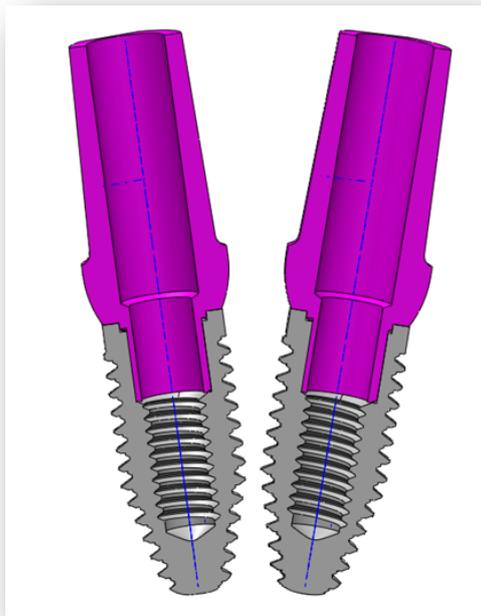


COME SI ESCE DALLE GEOMETRIE ?

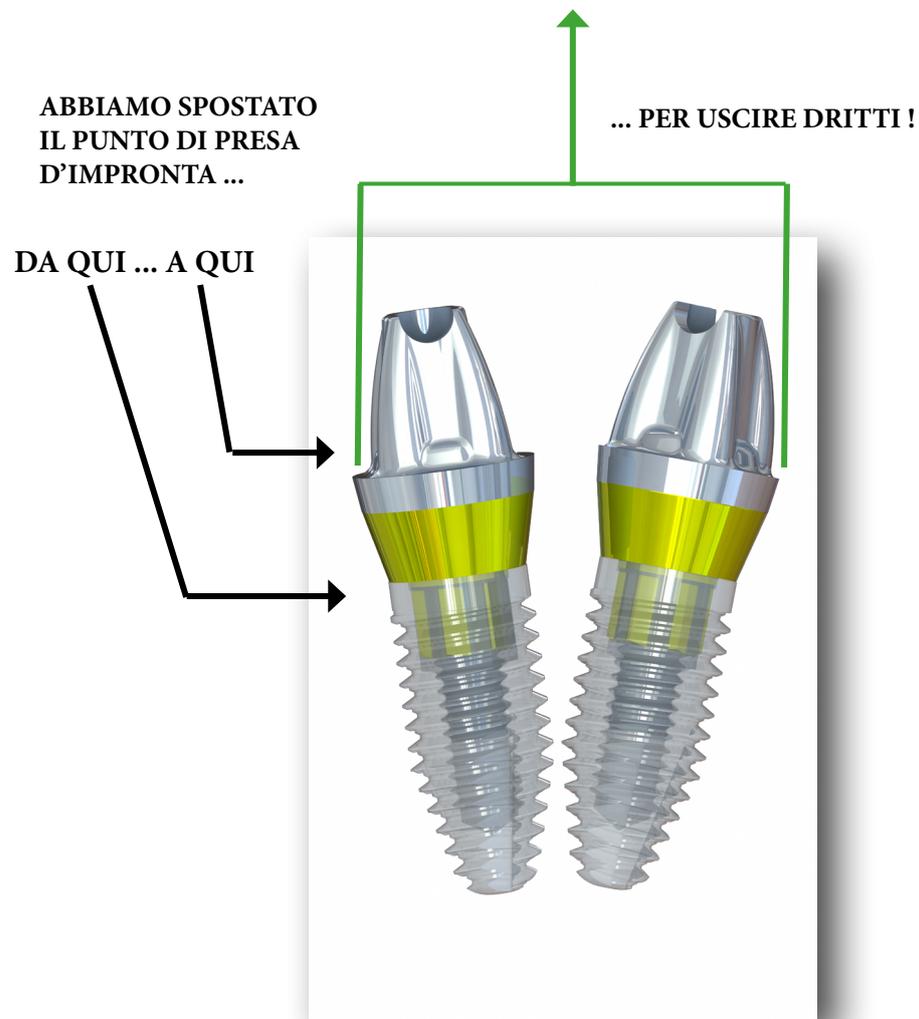

## PROCEDURA

0

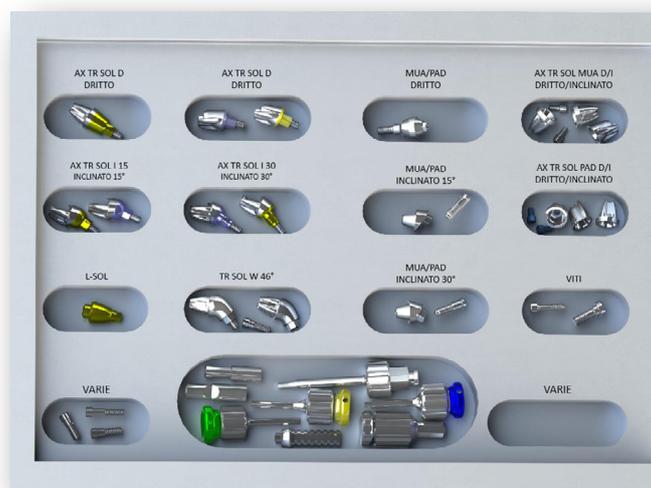

IL BOX "STER-SOL" AUTOCLAVABILE CONTIENE I DISPOSITIVI DELLA SISTEMATICA  
IN KIT DEDICATO A OGNI GEOMETRIA IMPLANTARE

# 1



PER INDIVIDUARE LA DIREZIONE DEGLI ASSI IMPLANTARI, AVVITARE MANUALMENTE NELLE FIXTURE I PIN DEDICATI, OPPURE INSERIRVI DEI MONCONI PER PROVVISORI NON ROTANTI

# 2



SCEGLIETE E AVVITATE IL DISPOSITIVO PIU' ADATTO IN BASE A PROFONDITÀ DEL SOLCO E ROTAZIONE SULLASSE



IL RISULTATO SARÀ QUESTO.  
**NON SERVE SPLINTARE !**

\* direzione d'uscita dell'impronta


3



INTERNO SPECIALE CAPPETTA


INSERIRE LA SPECIALE CAPPETTA CONTROLLANDO CHE IL SUO LOBO INTERNO CORRISPONDA ALLA CAVA DEL DISPOSITIVO

4

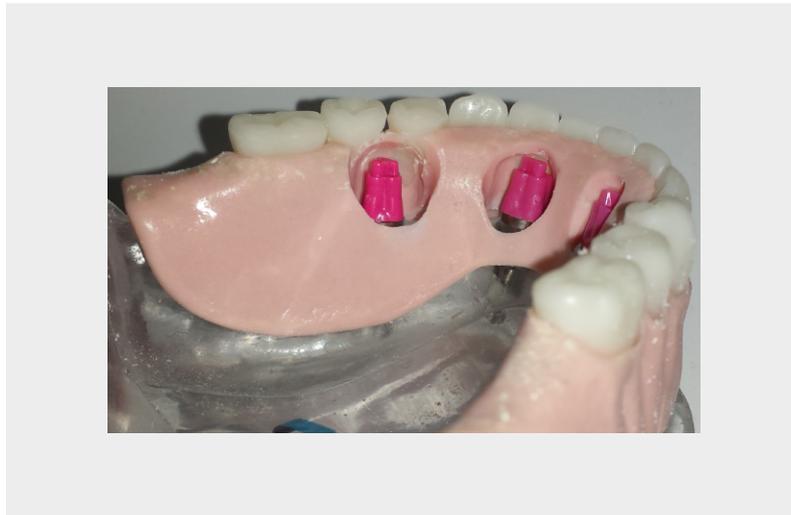


APPLICARE UN ADESIVO AL CUCCHIAIO CHIUSO (o parzialmente aperto, come nella foto).  
NON APPLICARNE ALLA SPECIALE CAPPETTA.

5

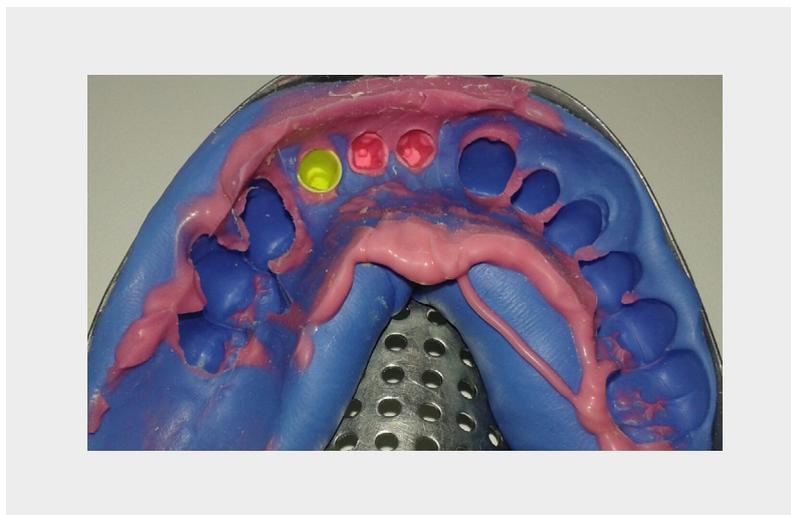

RILEVARE L' IMPRONTA

# 6

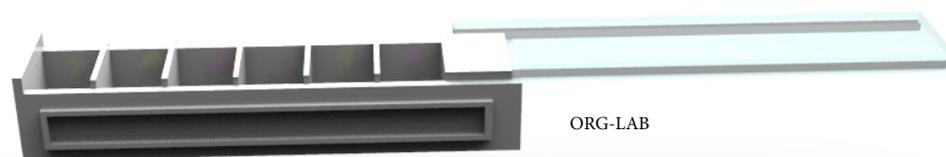


18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

ADESIVI

- SVITARE I DISPOSITIVI DAL CAVO ORALE,
- PASSARLI IN ULTRASUONI,
- DISINFETTARLI
- METTERLI NELL' ORG-LAB UNO ALLA VOLTA DOPO AVER CONTRASSEGNAO LE CELLE MEDIANTE GLI ADESIVI RIPORTANTI LA NUMERAZIONE INTERNAZIONALE DEI DENTI, COME DA ISTRUZIONI NELLA CONFEZIONE.
- INVIATELI AL LABORATORIO.


## IN LABORATORIO

- AVVITARE IL DISPOSITIVO SOL® IMPRONTAFACILE SULL' ANALOGO TENENDO I DUE DISPOSITIVI TRA LE MANI.
- SPINGERE L'ASSIEME NELLA SPECIALE CAPPETTA CHE SI TROVA NELL'INTERNO DELL' IMPRONTA.

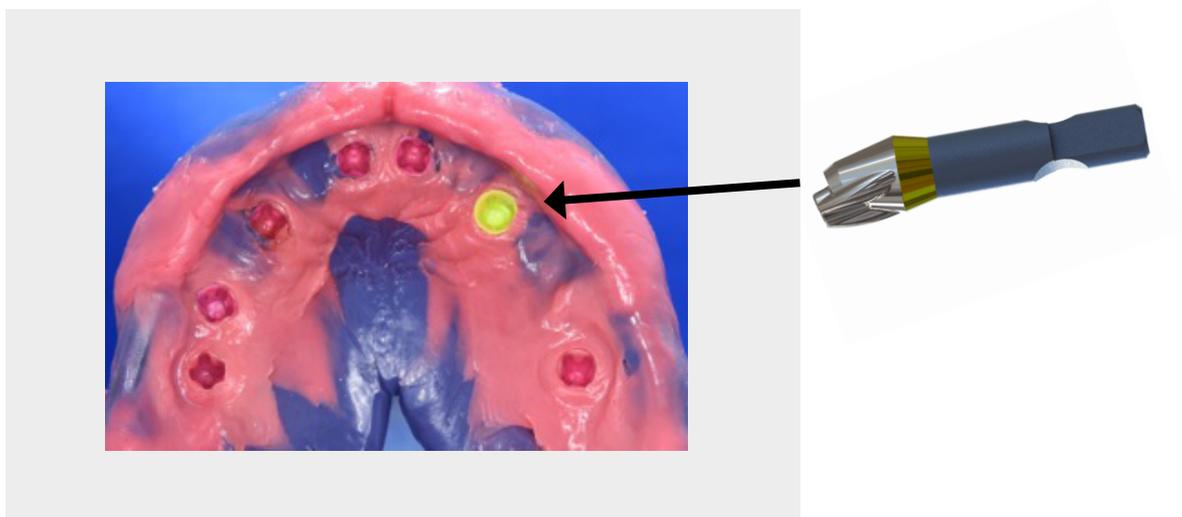

LA TRADIZIONALE MANOVRA TORSIVA E DI AVVITAMENTO DELL'ANALOGO AL-TRANSFER (CHE POTREBBE PROCURARE LA ROTAZIONE DEL DISPOSITIVO NELL' INTERNO DELL' IMPRONTA), CON SOL® IMPRONTAFACILE NON È NECESSARIA.

Cerco la forma in tutto quel che intraprendo...  
...la semplicità è una complessità risolta  
Constantin Brancusi

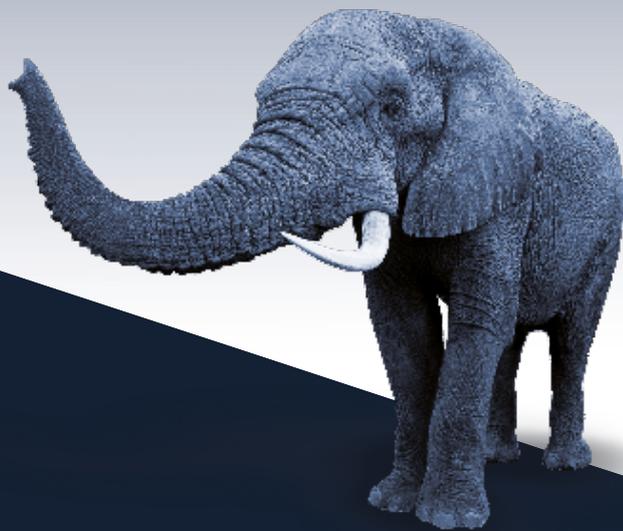

SODIM srl  
via Circonvallazione, 4  
28015 Momo (NO)  
tel. +0321 926778  
N.REA: NO - 233241  
SODIM.SRL@PEC.IT  
info@sodimsrl.com  
www.improntafacile.it  
www.sodimsrl.com